



Cuidar da saúde e do bem-estar ficou mais simples. Bem-vindo ao futuro!

Analizador de Composição Corporal Digital

Exclusivo sensor ITO Glass para análises precisas de biometria através da tecnologia de bioimpedância.

Resultado em 3 segundos

Leitura via Bluetooth®

Exclusivo aplicativo Scale Up em português



SKN1801

Tecnologia de ponta em todos os sentidos

Análises precisas em apenas 3 segundos e de até 16 medições de bioimpedância de última geração. Parece impossível? Esta é a realidade de quem trabalha com o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices! Uma verdadeira revolução no mundo da saúde chega às suas mãos através de um produto com tecnologia de ponta e design clean. Como não poderia deixar de ser, uma combinação na medida certa.



O exclusivo sensor de alta precisão e velocidade ITO Glass, fabricado com Óxido de Índio e Estanho, dispensa o uso de condutores de metais. Simples assim. Não tem segredo ou necessidade de qualquer outro equipamento. Todas as informações são obtidas e enviadas para o aplicativo Scale Up via Bluetooth® e você confere os resultados em seu próprio smartphone ou tablet.

Confira abaixo todas as tecnologias presentes e mais diferenciais:

- 1 - ITO Glass: a superfície de vidro não possui metais que causam interferência nas análises. A transferência elétrica é realizada por uma película de óxido de índio e estanho sobre o vidro (ITO glass).
- 2 - Bluetooth® de alta performance.
- 3 - Strain Gauge: sensores de alta precisão.
- 4 - MCU de 8 bit: microchip de controle de alta velocidade.
- 5 - ADC de 18 bit: conversor digital de precisão que gera análise em apenas 3 segundos.
- 6 - Display em LED: baixo consumo e longa durabilidade.
- 7 - Liga e desliga automaticamente.
- 8 - Funciona com 3 pilhas palito AAA de 1,5v que acompanham o produto.
- 9 - Acompanha bolsa de bubble neoprene com alças.
- 10 - Aplicativo exclusivo em português Scale Up, versão Apple e Android.

App Scale Up!

As análises obtidas pelo Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices são enviadas via Bluetooth® para o aplicativo Scale Up. Veja como é simples e rápido baixar o aplicativo e já começar a utilizar suas funcionalidades.

1 - Baixe o aplicativo Scale Up em seu smartphone e/ou tablet. O app é gratuito e compatível com smartphones Android 4.3 ou superior e iOS iPhone 4s ou superior. Disponível para download nas respectivas lojas de aplicativos.





Scale Up



2 - Após baixar o aplicativo, cadastre seu nome, nascimento e altura. Caso deseje, é possível cadastrar o perfil de outras pessoas (até 8 usuários) seguindo o mesmo procedimento. **IMPORTANTE:** indique com a maior precisão possível peso, altura e demais medidas. Defina também os objetivos que deseja alcançar, como perda de peso, por exemplo. Isso impactará em análises futuras e no acompanhamento da evolução física.



Ao finalizar o preenchimento, o perfil será criado e você terá acesso ao painel de gerenciamento. Para cadastrar outro perfil, basta clicar na opção "+ Novo".

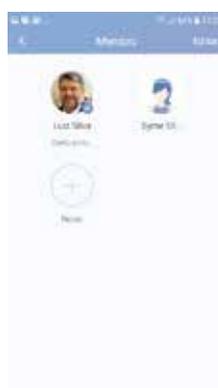
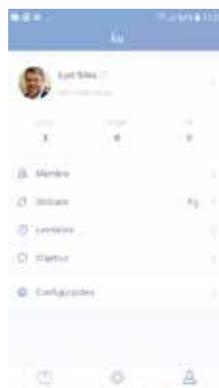


3 - Agora você já pode utilizar o seu Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices. Para tal, ative o Bluetooth® em seu dispositivo móvel e suba (ou solicite que o usuário suba) no analisador.



Conheça as análises constantes do Relatório de Avaliação Física!

Em apenas 3 segundos as leituras são exibidas no app Scale Up. Peso, IMC e Gordura são indicados imediatamente. Ao clicar em “Relatório de avaliação física”, as análises constantes são apresentadas de maneira organizada e com divisões que facilitam a leitura. Você também confere dicas para chegar aos objetivos previamente cadastrados.

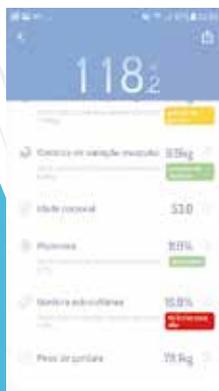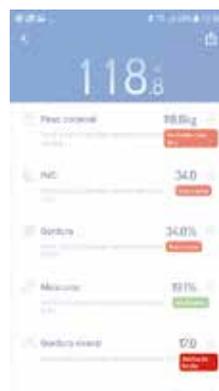



Intervalos de pesagem	100g ou 0,1lb
Gordura corporal	0,1%
Água corporal	0,1%
Massa muscular	0,1%
Massa óssea	0,1%
Gordura visceral	1,0%
IMC	0,1%
Metabolismo basal	1Kcal

Conheça as principais análises constantes do Relatório de Tendências Gráficas!

4 - Sabia que é possível acompanhar diariamente, semanalmente e mensalmente a evolução física de cada usuário, de pessoas sedentárias a atletas profissionais, dentro próprio aplicativo? Os relatórios são exibidos através de gráficos personalizados de massa muscular em percentual, controle de variação de peso, gordura corporal em Kg e muito mais. Para facilitar ainda mais, os gráficos são organizados lado a lado, na mesma categoria, e podem ser acessados apenas com um clique.





5 - Crie lembretes dentro do app para facilitar a rotina e incentivar hábitos mais saudáveis.


6 - Que tal compartilhar suas análises e participar de uma comunidade de pessoas que também valorizam a saúde? Pelo aplicativo você pode enviar o relatório completo ou parcial com suas medições. Também pode consultar perfis de outros usuários e acessar os relatórios enviados por terceiros. Faça o teste: digite no campo **“Busca”** o nome de uma pessoa que você conhece e que também utiliza o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices.



7 - O aplicativo pode ser sincronizado com o Apple Health! Incrível, não é? Uma das funcionalidades mais famosas do iOS totalmente alinhada com o app do Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices.

O que é bioimpedância?

Método não-invasivo, rápido e seguro de análise de composição corporal que possibilita diversas leituras sobre a saúde e condição física do usuário. A bioimpedância é uma tendência em todo o mundo e permite a análise de peso corporal, massa muscular, calorias e muito mais. A vantagem da bioimpedância é que todas as informações podem ser obtidas e analisadas em um mesmo momento, ou seja, não é preciso realizar diversos exames.

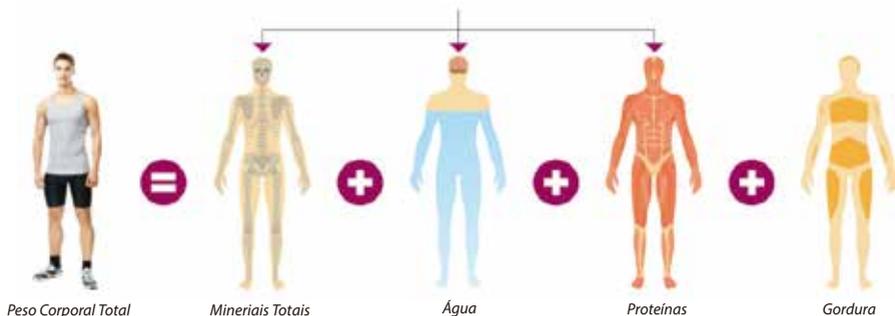

Por que utilizar o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices?

A tecnologia evolui em um piscar de olhos. A cada dia novos produtos chegam ao mercado e revolucionam nosso dia a dia pessoal e profissional. No mundo da saúde não é diferente e quem trabalha na área deve estar preparado para não perder espaço no mercado. Com o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices, você:


- Fideliza e melhora a comunicação com o público que procura soluções dinâmicas e precisas para cuidar da saúde e do bem-estar.
- Disponibiliza os resultados através do aplicativo Scale Up e não perde tempo digitando os resultados da bioimpedância.
- Posiciona seu negócio como referência em tecnologia, um grande diferencial nos dias de hoje.
- Tem a garantia de contar com um produto de altíssimo padrão e que segue as principais tendências globais do setor da medicina. É um produto de fácil limpeza e manutenção barata.
- O Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices vem com uma exclusiva bolsa para transporte com alças.
- Com o Analisador de Composição Corporal Digital é possível acompanhar a evolução física dos usuários e definir programas de metas a curto, médio e longo prazo.



Utilizando o Analisador de Composição Corporal Digital


Agora que você já baixou o aplicativo, veja como prosseguir para utilizar o Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices:

1- Remova o produto da caixa. Na parte inferior traseira do Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices está o compartimento das pilhas, abra-o. Verifique e localize na embalagem as 3 pilhas AAA que acompanham o produto. Encaixe-as corretamente no compartimento, prestando atenção ao sentido dos polos (+ e -) indicados.

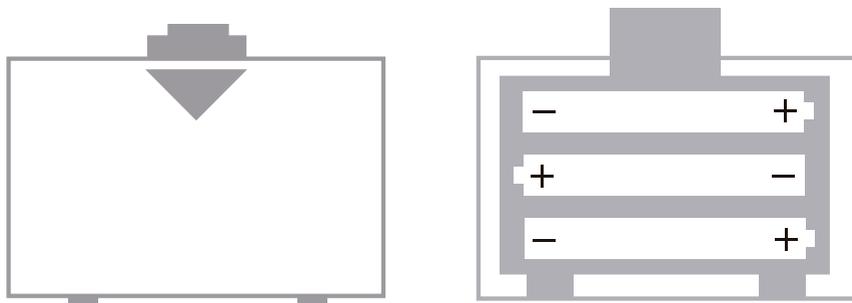

2 - Antes subir no analisador, abra o aplicativo e ative o Bluetooth® no smartphone ou tablet.

3 - Posicione o analisador com o logotipo da SkinUp Beauty Devices, localizado no círculo metálico central, na posição correta (cuide para não estar de ponta-cabeça).

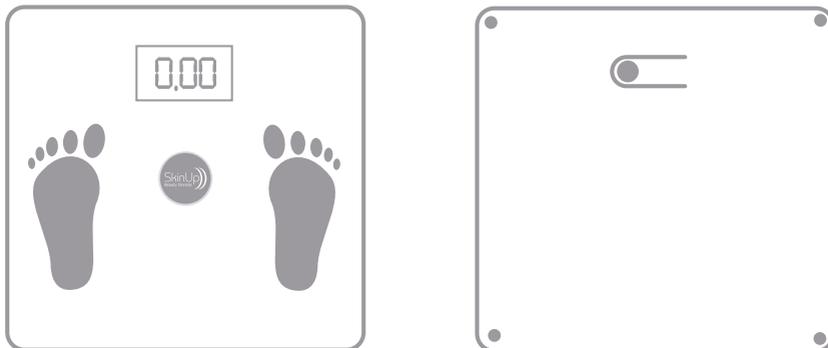

O produto deve sempre ser utilizado no chão firme e sem inclinação.

Tecnologia de ponta em todos os sentidos

4 - O usuário deve subir no Analisador de Composição Corporal Digital SKN 1801 da SkinUp Beauty Devices sem calçados e meias, com os pés descalços e com o mínimo de peças de roupa possível. De preferência sem objetos metálicos junto ao corpo.

5 - Em até 3 segundos, o visor do aparelho acenderá, indicando o peso da pessoa e um ícone do Bluetooth®. Neste momento, o aplicativo Scale Up já terá recebido todas as medições.



6 - Após o aplicativo indicar o recebimento das medições, o usuário poderá validar a leitura ou descartá-la, seguindo as instruções na tela do aplicativo. Na sequência, basta descer do analisador. Não é preciso desligar o aparelho, pois o mesmo desligará automaticamente após alguns segundos.

7 - Caso deseje somente verificar o peso, não é preciso ativar o aplicativo e o Bluetooth® do smartphone.

GARANTIA DO PRODUTO:

Este produto foi desenvolvido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, sendo garantido durante 12 MESES para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Certificação ANATEL

Cuidados básicos, problemas e soluções: consultar manual de instruções do produto.